



MANUAL DE

P A R L E I T E

COLETA GCCQ



Sobre nós



A Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa (APCBRH), fundada em 27 de março de 1953, é uma entidade sem fins lucrativos que se dedica ao desenvolvimento da cadeia produtiva do leite. Ela oferece soluções em várias áreas, incluindo Melhoramento Genético, Gestão de Rebanhos, Indicadores de Produção, Reprodução, Nutrição, Saúde Animal e Qualidade do Leite, beneficiando produtores, técnicos, cooperativas e empresas de laticínios.



O Laboratório iniciou suas atividades em 1991, em parceria com a APCBRH, UFPR e McGill University, e obteve seu primeiro credenciamento em 1992. Desde 2002, é membro da Rede Brasileira de Laboratórios de Controle da Qualidade do Leite (RBQL) e é credenciado pelo Ministério da Agricultura desde 2008.

Garantia de Qualidade



O Laboratório atende às demandas dos programas oficiais para monitoramento da qualidade e melhoria da qualidade do leite, serviços de inspeção de produtos de origem animal, além de realizar análises de Controle Leiteiro e Gestão de Controle de Qualidade (GCQ).

As análises são realizadas por métodos de FTIR e Citometria de Fluxo. São utilizados equipamentos de última geração, calibrados com amostras de referência internacionais. O Laboratório ainda participa de ensaios interlaboratoriais e de proficiência, para garantia da acurácia dos resultados.

[Integrante da RBQL](#)

[Credenciamento Ministério da Agricultura
Portaria - No. 348, de 22 de setembro de 2014.](#)

[ABNT NBR ISO/ IEC/ 17025:2017 \(CRL-0868\)
desde 24/07/2015](#)

[Saiba mais sobre o laboratório](#)



Execução da coleta




IDENTIFICAÇÃO DO FRASCO DE AMOSTRA

O frasco deverá ser identificado na tampa correlacionando a identificação do animal com o número da planilha, ou utilizando etiqueta com código de barras encaminhado pelo laboratório a partir da segunda remessa.

COLETA DA AMOSTRA Cada animal devesse ter uma amostra de leite coletada no frasco específico enviado pelo Laboratório, qual contém um conservante (BRONOPOL), para assegurar a qualidade da amostra até o momento da análise.

“ATENÇÃO, NUNCA COLETAR DIRETAMENTE DO ÚBERE DO ANIMAL”

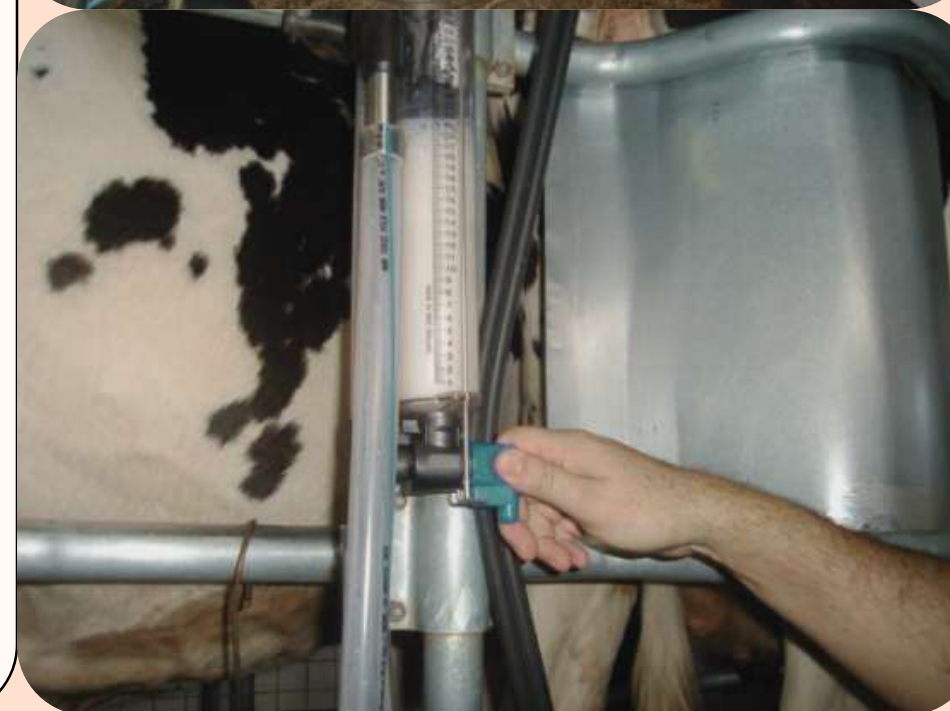

PESAGEM DO LEITE O leite individual de cada animal deverá ser pesado ou o volume medido, conforme as características do sistema de ordenha.

Balde ao pé – O leite poderá ser pesado ou o seu volume medido em balde transparente com escala, para que se possa descontar a espuma. A respeito da homogeneização o leite devesse ser passado de balde para outro por 3 (três) vezes consecutivas.

Canalizado – O leite devesse ser medido em medidores próprios para instalações com leite canalizado. A respeito da homogeneização, agitar o leite no medidor, deixando entrar ar, sendo 1 segundo por litro de leite, e no mínimo 10 segundos.

Execução da coleta



COMO COLETAR AMOSTRA

Balde ao pé – Utilizar uma concha e colocar no frasco respeitando as marcas de cada ordenha. Nunca encher o frasco totalmente.



Canalizado – Abrir o registro do medidor e colocar no frasco respeitando as marcas de cada ordenha. Nunca encher o frasco totalmente.

OBS: Agitar os frascos após a coleta para dissolução do conservante.



CAIXA DE AMOSTRAS

- Ordenar os frascos na caixa na mesma seqüência do relatório;
- Enviar a caixa completa, com frascos cheios e vazios;
- Sempre enviar na caixa o relatório com as pesagens;
- Sempre enviar na caixa a requisição de análise devidamente preenchida com dados do produtor e data de coleta das amostras;
- Preencher a sobre tampa da caixa com o nome do produtor;
- Não é necessário refrigerar;
- Enviar preferencialmente via transportadora com entrega no Laboratório;



Acesso dos resultados



O **prazo de análise é de 4 dias úteis** a partir da data de chegada das amostras no laboratório.

Todo produtor cadastrado no Parleite possui um login e senha de acesso aos resultados. Para acessar basta baixar o APP ou acessar o site.

Na tela inicial você tem acesso ao extrato da qualidade (se analisado) e gráficos gerais do rebanho.


Para acompanhar o andamento do protocolo no laboratório acesse: Menu > Relatórios > **Situação das Análises** e navegue alterando o mês vigente no topo da página.

Em Menu > Relatórios > **GCQ3** é possível visualizar os resultados de CCS individual das vacas. Se estiver sentindo falta de alguma amostra, é possível conferir no final do relatório **GCQR2** se houve amostras descartadas.

O relatório **GCQ5** só é gerado quando as amostras vem com volume de leite informado.

Caso necessário, é possível gerar o **Relatório de Campo (GCQR1)** através do caminho Menu > Relatórios > GCQR1.

produtor.parleite.app/login

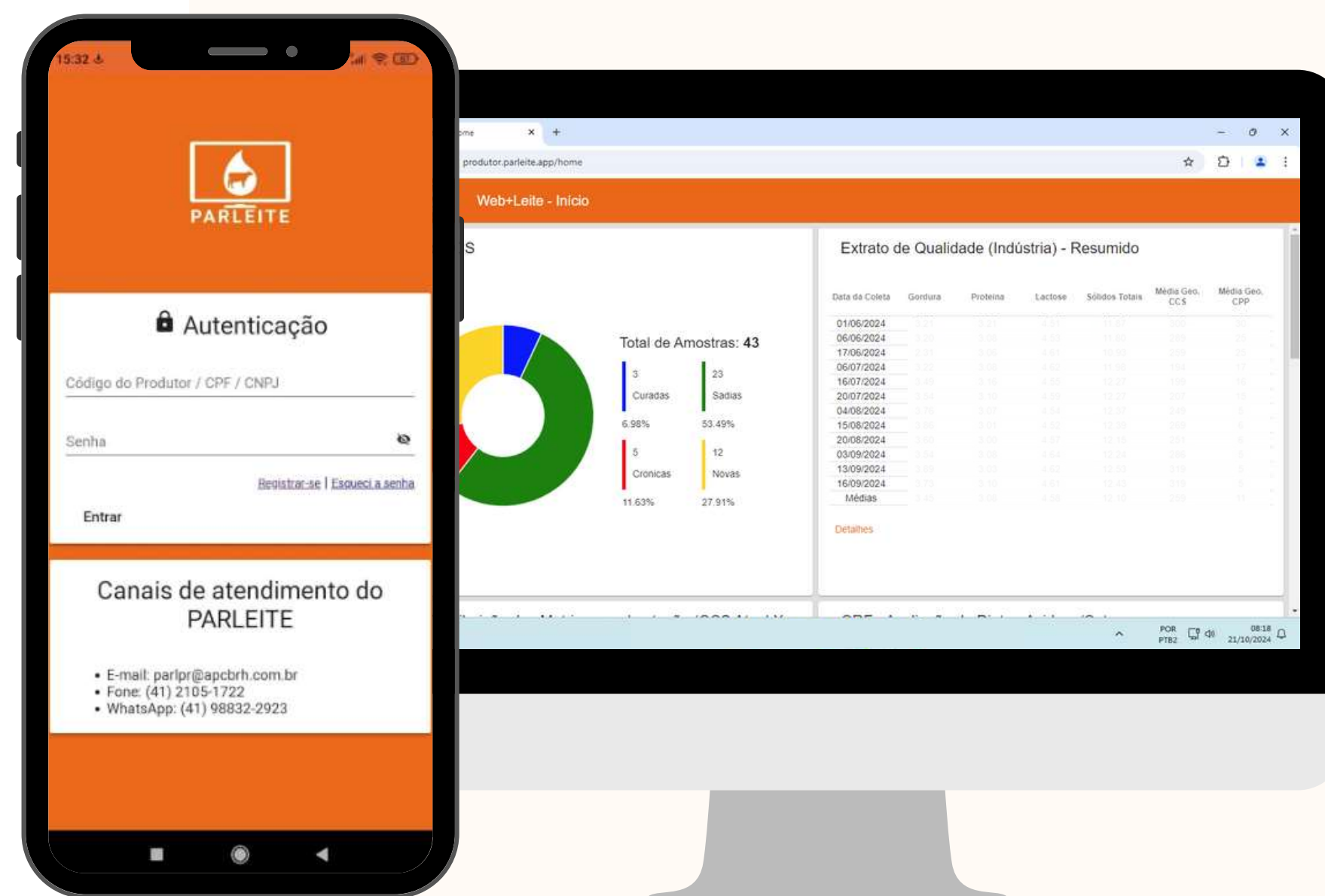



Informações adicionais

Horário de atendimento do Laboratório

Secretaria: Segunda a sexta-feira das 7:45 às 12:00 e das 13:00 às 17:30 horas

Recepção de amostras do Laboratório: Segunda a sexta-feira das 7:45 às 12:00 e das 13:00 às 17:30 horas e nos sábados até as 12:00 horas

Dados para envio de amostras

Razão Social: Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa

Nome do Laboratório: Laboratório Centralizado de Análise de Leite do PARLPR

Sigla: PARLPR

CNPJ: 76.607.597/0001-07

Inscrição Estadual: 101.157.39-39

Endereço: Rua Professor Francisco Dranka, nº 608

Bairro Orleans

Cidade: Curitiba – PR

CEP: 81200-404

Enviar preferencialmente via transportadora e sempre com entrega no Laboratório.



Agradecimento

Prezados colaboradores,

Gostaria de reforçar a importância da colaboração de cada um de vocês em nossa missão de entregar um serviço de qualidade ao produtor. Cada etapa do nosso trabalho depende da dedicação e do esforço conjunto, pois é a união das nossas habilidades e conhecimentos que nos permite superar desafios e alcançar resultados excepcionais.

Acreditamos que, ao trabalharmos em sintonia, podemos garantir que cada produtor receba não apenas um serviço, mas uma experiência que faça a diferença em seu dia a dia. Vamos continuar a nos apoiar mutuamente, compartilhando ideias e soluções, para que possamos crescer juntos e entregar sempre o melhor.


Conto com o comprometimento de todos para fazermos a diferença!


Atenciosamente, Equipe PARLEITE.





Obrigado!

 [\(41\) 98815-5248](tel:(41)98815-5248)

 (41) 2105-1722

 parleite@apcbrh.com.br

Elaborado por:

Geovana Ribeiro

Revisado e aprovado por:

José Augusto Horst - Gerente do PARLEITE